




2 A Teschio e denti, 1489.

RL 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e 'l vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.

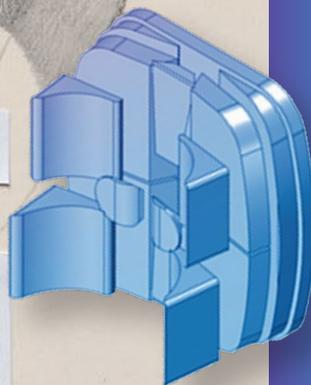

UNA NUOVA SOLUZIONE
THE TRUNK TOTAL SUPPORT

UNA NUOVA SOLUZIONE

TTS TRUNK TOTAL SUPPORT

Kit posturale per il tronco ad inserti modulari



Perchè Conco ?

- FINALMENTE LO SCHIENALE POSTURALE PRIVO DI HARDWARE E SCOCCA METALLICA
- ULTRALEGGERO, CONFORTEVOLE, SICURO
- FLESSIBILE, PER MUOVERSI IN LIBERTÀ
- VESTIBILITÀ, SOSTEGNO E CONTROLLO DEL TRONCO ADATTABILI INDIVIDUALMENTE, INSTANTANEAMENTE E SENZA ATTREZZI



KIT STRUTTURALE
MODULARE E MODIFICABILE
CON 16 INSERTI



SCHIUMA POLIURETANICA ELASTICA
O MEMORY FOAM



DISPONIBILE CON O SENZA
SISTEMA TENSIONABILE

* LADDÒVE DOTATO DIVENTA MULTI-REGOLABILE
IN PROFONDITÀ, ALTEZZA ED INCLINAZIONE

INDICAZIONI CLINICHE E D'USO

L'unità posturale tronco Inserto Back Conco è consigliata preferibilmente ma non esaustivamente per:

- Utenti ad ALTO rischio sviluppo UDP rachidee
- Suggesta anche in combinazione con ortesi per il rachide
- Scarico rachideo adattabile a gibbi e protrusioni

TTS FORME ACCOLTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit strutturale composto da:
 - Base piatta di costruzione e 16 inserti in polietilene a celle chiuse, personalizzabili e modificabili, utili a sorreggere e sostenere o correggere nel tempo la postura del tronco individualmente.
- Imbottitura in un unico strato di schiuma poliuretanic elastica o memory foam
- Fodera di rivestimento microclimatica traspirante, ignifuga, antibatterica; lavabile in acqua tiepida con detergente neutro. Si sconsiglia di utilizzare macchine per l'asciugatura. Il materiale non prevede l'impiego di sostanze disinfettanti.
- Il sistema tensionabile opzionale si presenta nella forma di fasce singole le cui quantità sono dettate dall'altezza dello schienale scelto o nella combinazione di una fascia centrale doppia con fasce singole superiori o inferiori

*Per l'installo su carrozzina, seguire le informazioni riportate sulla scheda tecnica del manuale di istruzione d'uso.

AVVERTENZE

L'Unità posturale Inserto Back Conco, nella sua integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione (Kit strutturale, Kit imbottitura, Rivestimento) può essere semplicemente adattata alle misure / morfologia / deformità dell'utilizzatore. Questo tipo di operazioni rendono la messa in servizio riferibile a quella di un dispositivo di fabbricazione di serie.

In alternativa

La messa in servizio dell' Unità Posturale Inserto Back Conco, priva o modificata anche parzialmente della integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione approntata e costruita secondo la prescrizione scritta da parte dell'operatore professionale in funzione dell'anatomia / morfologia / deformità dell'utilizzatore attraverso rilievo delle sue misure e prove dirette, è riferibile a quella di un dispositivo fabbricato su misura.

RICAMBI

- Imbottitura
- Fodera di rivestimento
- Sistema tensionabile a fasce singole
- Sistema tensionabile a fascia centrale e a fasce singole



CONCO

CONCO
inserto®
BACK



Inserto Conco

16 INSERTI MODULARI MODIFICABILI




FODERA DI RIVESTIMENTO MICROCLIMATICA E TRASPIRANTE

° Ogni kit posturale è da ordinare in base alla misura della carrozzina/dispositivo di trasporto.

Misura (cm)	2415	2421	2815	2821	3215	3221	3227	3618	3624	3630	4018	4024	4030
larghezza effettiva scocca	19	19	23	23	27	27	27	31	31	31	35	35	35
altezza effettiva scocca	15	21	15	21	15	21	27	18	24	30	18	24	30
*largh. est.-est. tubi carrozzina	24-26	24-26	28-30	28-30	32-34	32-34	32-34	36-38	36-38	36-38	40-42	40-42	40-42
fasce singole H 5 cm	3 fasce	4 fasce	3 fasce	4 fasce	3 fasce	4 fasce	5 fasce	3 fasce	4 fasce	5 fasce	3 fasce	4 fasce	5 fasce
fascia centrale H 10 cm e fasce singole H 5 cm	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓

* valori indicativi

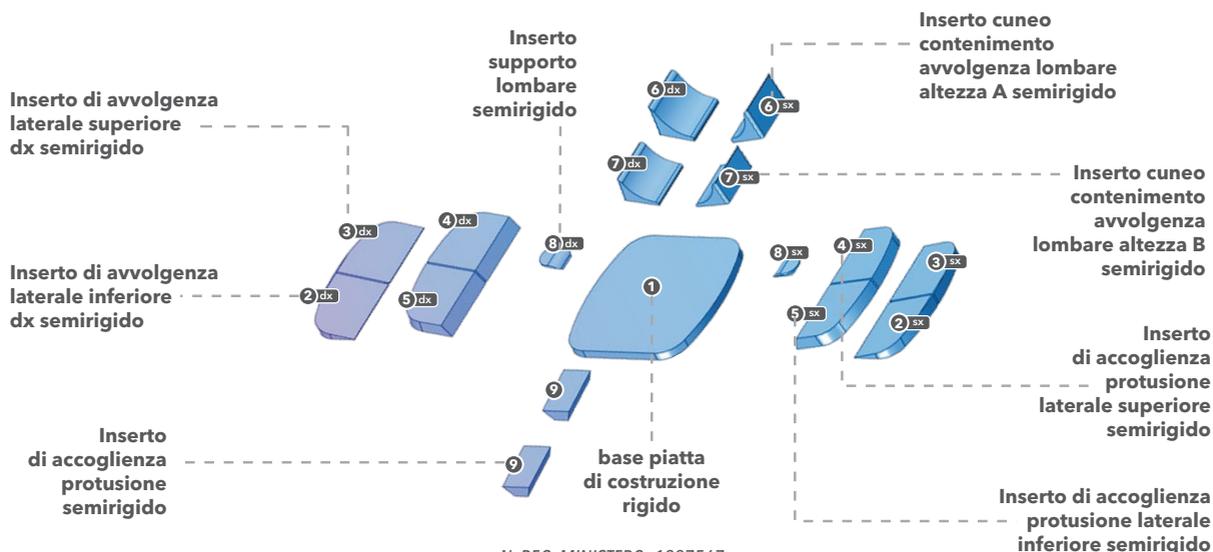

N. REG. MINISTERO: 1887567

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.versainsero.com

CONCO
inserto[®]
B A C K

PRODOTTO DA:



Pro Medicare srl

Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY

Tel. +(39) 0831 777840

Fax. +(39) 0831 730739

Email: sales@promedicare.it


www.versainserto.com

www.promedicare.eu


AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485
N° 279412 / N° 279411



ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

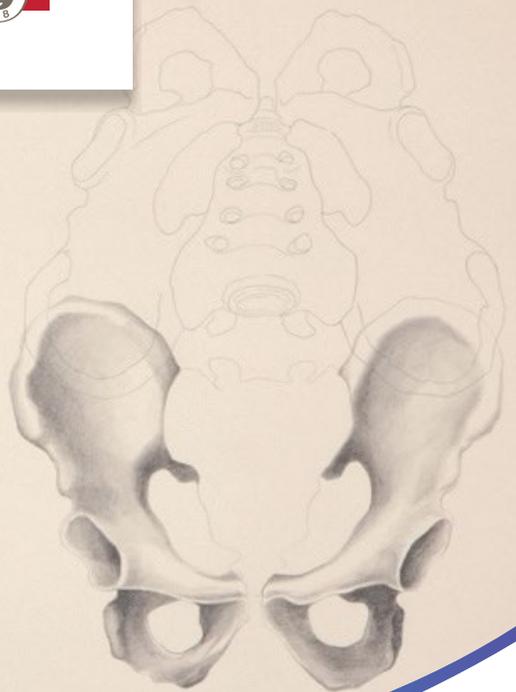

DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserto.com