






HEALIX[®]
MADE TO BE BENCHMARK

Posizionatore **M**odulare
Toto **C**orpo **P**er **P**ronazione

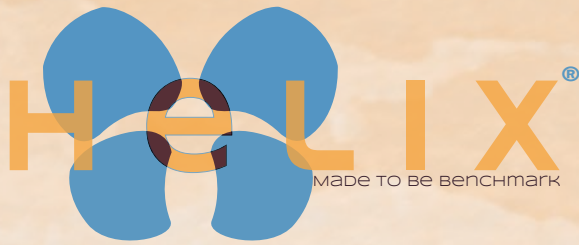

Il Sistema di posizionamento modulare
Toto Corpo per pazienti pronati allettati,
ospedalizzati, adolescenti ed adulti

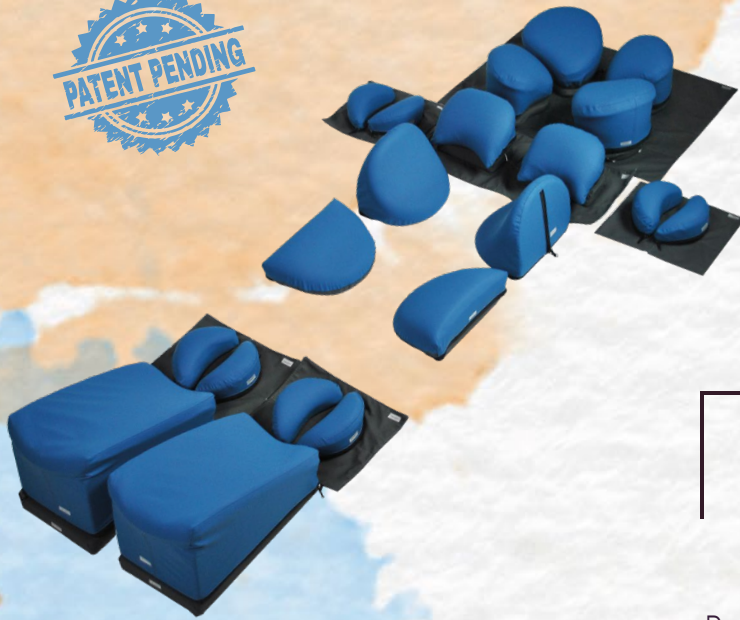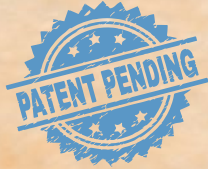

*...L'Elica ha ispirato la forma del
Sistema per supportare il capo,
quindi Helix, il Sistema di Postura
per la Pronazione Toto Corpo...*

Dispositivo utilizzabile su pazienti di altezza
compresa tra 1.60mt e 1.90mt
(previa verifica delle dimensioni del materasso);

Peso complessivo intero sistema: 3.5kg

Registrazione Ministero/Repertorio n° 1947351/R

PERCHE' HELIX ?

HELIX è il Sistema di Postura modulare progettato per sostenere
in maniera armonica, individualizzata e rilassata
tutto il corpo del paziente in pronazione.

- **PERMETTE** di approntare l'assetto posturale individualizzato in pronazione sul materasso;
- **FAVORISCE** la redistribuzione e lo scarico delle pressioni al fine di prevenire le complicazioni, quali UDP (Ulcere da Pressione), edemi, traumi facciali, danni muscolo-articolari e contratture;
- **CONSENTE** micro spostamenti, piccole modificazioni ed inclinazioni posturali per ogni tratto corporeo ed in toto corpo;
- **FACILITA** lo scarico delle zone corporee sottoposte a maggiore carico pressorio, quali capo, torace, petto, gomiti, genitali, ginocchia e piedi;
- **ASSICURA** l'allineamento e la completa gestione posturale del paziente in pronazione attraverso piccole modificazioni.

Dispositivo medico di Classe I non sterile marcato CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745

COMPOSIZIONE

Il sistema di posizionamento HELIX è caratterizzato da una struttura modulare e si compone di sette gruppi di elementi indipendenti la cui superficie inferiore ha proprietà antiscivolo e di sei tappetini flessibili come base d'appoggio, anche essi antiscivolo.

Helix si compone di:

- Elementi per il capo e Tappetino flessibile
- Elementi di appoggio e contenimento articolazione gomiti e Tappetino flessibile
- Elementi di appoggio Sotto-Clavicolari e Tappetino flessibile
- Elementi di appoggio e contenimento Torace
- Elementi di appoggio e contenimento Articolazione Anche
- Elementi di appoggio e contenimento Articolazione Ginocchia e Tappetino flessibile
- Elementi di appoggio e contenimento Gamba/Piede



CAPO



GOMITI



SOTTO CLAVICOLARI



TORACE



ANCHE



GINOCCHIA



GAMBA/PIEDE

MODULARITA' E COMBINAZIONI

HELIX, l'innovativo Sistema di Postura per la Pronazione Toto Corpo, si personalizza in dieci minuti, adattandosi perfettamente ad ogni morfologia dell'uomo e della donna.



Ogni singolo elemento è modulare ed adattabile



Posizionamento personalizzato immediato

MATERIALI

ELEMENTI

Ogni elemento che compone HELIX è realizzato in materiali polimerici combinati al fine di garantire:

DENSITA', PORTANZA, MEMORIA DI FORMA e CONFORT.

RIVESTIMENTO

Il tessuto (PU/PES) removibile che riveste ogni elemento ha le seguenti proprietà:

- Traspirante
- Impermeabile
- Antibatterico
- Non Citotossico
- Non Irritante
- Resistente alla Penetrazione di Virus
- Antifungo
- Ignifugo
- Biocompatibile
- Certificato Oeko-Tex
- Privo di Lattice
- Lavabile ad alte Temperature (95° max 10 lavaggi o a Secco)
- Sterilizzabile in autoclave (134°/ 5 min. max 10 cicli di sterilizzazione)
- Disinfettabile ed Igienizzabile

ELEMENTI IN DOTAZIONE


- Dotato di una dotazione di foderine e traversine per la prima applicazione;
- Dotato di postazione mobile attrezzata integrata di guida illustrata all'uso per minimizzare le operazioni del personale garantendo l'ordine di reparto.



HELIX - KIT DI CONSUMO

Sono disponibili i seguenti consumabili:

- Kit di foderine e traversine in TNT monouso 100% Polipropilene, idrorepellente, traspirante, non irritante e non citotossico;
- Kit di rivestimenti.

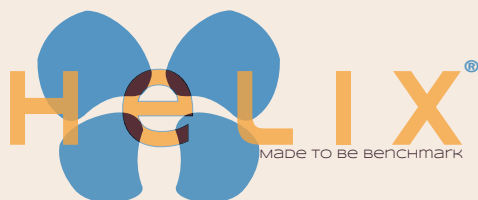

FABBRICATO E DISTRIBUITO DA:



Pro Medicare srl
Via A. Montagna - Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - Italy
tel. (+39) 0831 77 78 40
fax (+39) 0831 73 07 39
info@promedicare.it
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485
N° 279412 / N° 279411



ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



CE

2 ANNI DI GARANZIA



Il produttore si riserva di apportare modifiche o sostituzioni senza preavviso.

I contenuti di questo catalogo, sono di proprietà della Pro Medicare Srl. - Ogni utilizzo improprio e non autorizzato è vietato.