

TThinking

VersaInserto
SEATING SOLUTIONS

SEAT

SOLUZIONI POSTURALI PER IL BACINO PERSONALIZZABILI INDIVIDUALMENTE

P.T.S. (The Pelvic Total Support)

2 A Teschio e denti, 1489.

RL 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e 'r vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.



POSTURA PER PASSIONE DA OLTRE 20 ANNI

RISPOSTE REALI A BISOGNI SPECIALI

Impegnati da anni a sviluppare soluzioni posturali per rispondere alle esigenze più complesse in collaborazione con gli utenti, clinici, tecnici e care givers.





28th International Seating Symposium

Le nostre ricerche e i nostri lavori sono stati presentati nei più importanti congressi, sia in Italia che all'estero.

PTS (PELVIC TOTAL SUPPORT) UN INNOVATIVO APPROCCIO ALLA POSTURA


CONCETTO:

Supporto Totale del sistema di relazione Femori/Bacino/Rachide (coccigeo/sacrale/lombare) di Uomini, Donne e Bambini.

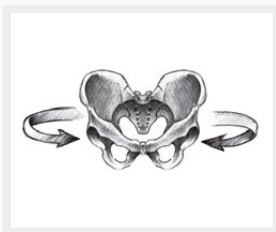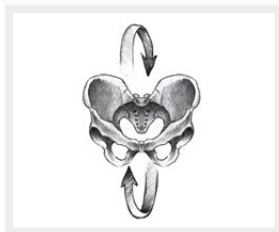

METODO:

Bilanciamento del sistema di relazione Femori/Bacino/Rachide (coccigeo, sacro, lombare) contenimento e stabilizzazione dell'anatomia, anche asimmetrica.

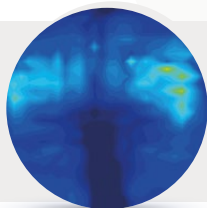

Risultati Test

La distribuzione delle pressioni oscilla in un intervallo compreso tra i 0,20 PSI e i 3,87 PSI (9,83 mmHg e 126,79 mmHg), i colori evidenziano la distribuzione dei picchi pressori sul cuscino. Dall'immagine si evince una completa aderenza ed elevata superficie di appoggio dell'anatomicità del bacino alla seduta (superficie in blu).

TECNOLOGIA

Struttura modulare composta da una base piatta di costruzione ed inserti pre sagomati indipendenti che assemblata si adatta a ogni forma, misura e morfologia di una persona seduta.



FACILE COME UN PUZZLE




Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.versainserito.com

POSTURA PER PASSIONE DA OLTRE 20 ANNI

UN MONDO DENTRO UN CUSCINO:

VESTIBILITÀ PERFETTA
CHE ACCOGLIE:

- bacino uomo, donna e bambino
- deformità differenti e combinate
- molteplici morfologie per l'intero ciclo di vita di utilizzo

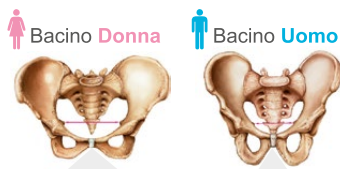


OGNI MODELLO INCLUDE NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD:



STRUTTURA E MATERIALI PER CONSENTIRE ALLINEAMENTO,
CONTROLLO DELLA POSTURA, DISTRIBUZIONE DELLE PRESSIONI E COMFORT.

KIT STRUTTURALE per la costruzione della seduta individuale allestita e approntata sull'utente

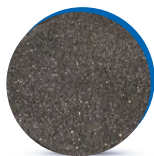



Polietilene combinato in differenti densità

Assorbe le vibrazioni e risponde con lento ritorno di memoria alle deformazioni. Estremamente leggero, permette modifiche con cutter.


KIT DI IMBOTTITURA *Forme Libere* per garantire perfetta aderenza al kit strutturale, al corpo e ai movimenti



Schiuma poliuretanică espansa flessibile ed elastica che supporta il movimento
Permette il ricircolo dell'aria.

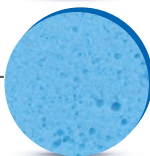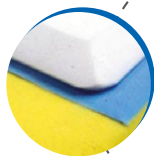


Schiuma poliuretanică viscoelastica flessibile a celle aperte
Antivibrante ed ammortizzante.

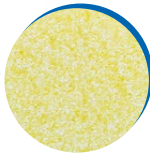

Schiuma poliuretanică antidecubito a ritorno lento di memoria
Aiuta la distribuzione delle pressioni e si adatta alla morfologia.

**MATERIALI
TESTATI
PER OLTRE
15 ANNI**

RIVESTIMENTO "NEW 3D"

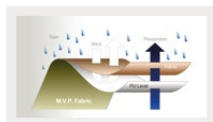

- ELASTICO - INCONTINENTE - TRASPIRANTE - LAVABILE A 60°



Stabile, sicuro e durevole:
Superato il test strutturale in base al metodo richiesto dagli standard ISO 16840:2014

TEST

Ignifugo:
Superati i test d'inflammabilità EN 1021-1:2014 E EN 1021-2:2014

SOLUZIONI POSTURALI PER IL BACINO PERSONALIZZATE

MODO
inserto
SPINE



**BAMBINO
ADULTO
ANZIANO**

- ✓ LESIONI DI ORIGINE TRAUMATICA E NON (ES. PARAPLEGIA, AMPUTAZIONI)
- ✓ PATOLOGIE GENETICHE (ES. SPINA BIFIDA)
- ✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE (ES. SM)

BASICO
inserto
SEAT



**BAMBINO
ADULTO
ANZIANO**

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. PCI, TC, ICTUS)
- ✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE (ES. SM, PARKINSON, ALZHEIMER)

VIP
inserto
SEAT



**BAMBINO
ADULTO
ANZIANO**

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. PCI, TC, ICTUS)
- ✓ LESIONI MIDOLLARI
- ✓ SLA

PRATICO
inserto
SEAT



**BAMBINO
ADULTO
ANZIANO**

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. PCI)
- ✓ PATOLOGIE GENETICHE (ES. SPINA BIFIDA)
- ✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE (ES. SM)
- ✓ LESIONI DI ORIGINE TRUMATICA E NON (ES. PARAPLEGIE)



AD O
LA GIUSTA
Versa
SEATING

IMPULSO
inserto
SEAT



**ADULTO
ANZIANO**

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. ICTUS)
- ✓ LESIONI DI ORIGINE TRAUMATICA E NON (ES. LESIONI SPINALI INCOMPLETE, FRATTURE ARTICOLARI FEMORE, BACINO)
- ✓ AMPUTAZIONI

MEDIANO
inserto
SEAT




**BAMBINO
ADULTO
ANZIANO**

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. PCI, TC)
- ✓ PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI (ES. DISTROFIE)
- ✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE E GENETICHE (ES. MALATTIA MOTONEURONE, SMA, SINDROME DI RETT)

MODELLO		BASICO	MODO	PRATICO	IMPULSO
UTENTE	CAPACITÀ DI SPINTA AUTONOMA	SI / NO	SI	SI	SI / NO
	RISCHIO IPERCARICO PRESSORIO	MEDIO / ALTO	MEDIO	LIEVE	ALTO
DEFORMITÀ	CAPACITÀ ALLINEAMENTO	LIEVE	LIEVE/MODERATA	LIEVE	MODERATA/ALTO
	CAPACITÀ CONTENIMENTO	LIEVE	LIEVE/MODERATA	LIEVE	MODERATA
CARATTERISTICHE	MANEGGEVOLEZZA TRASFERIMENTI LATERALI	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO

Le indicazioni riportate hanno uno scopo informativo e non sostituiscono la completa analisi medica che rimane sempre e comunque di competenza del medico specialista.

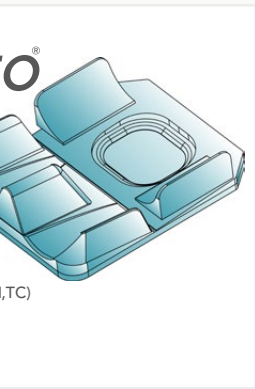

PUCCO
inserto
SEAT


BAMBINO



- ✓ CEREBROLESIONI (ES. PCI)
- ✓ PATOLOGIE GENETICHE (ES. SMA)

TANTO
inserto
SEAT

BAMBINO ADULTO

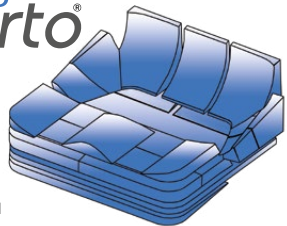

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. PCI, TC)
- ✓ LESIONI DI ORIGINE TRAUMATICA E NON (ES. LESIONI SPINALI)
- ✓ PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI E GENETICHE (ES. DISTROFIA, SPINA BIFIDA, SMA)
- ✓ AMPUTAZIONI (ES. EMIPELVECTOMIA)

ognuno
soluzione
Inserto
SOLUTIONS



NOVO
inserto
SPINE


BAMBINO ADULTO ANZIANO



- ✓ CEREBROLESIONI (ES. ICTUS)
- ✓ LESIONI DI ORIGINE TRAUMATICA E NON (ES. TETRAPLEGIA, FRATTURE ARTICOLARI, FEMORE E BACINO)
- ✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE (ES. SM,SLA)
- ✓ PATOLOGIE GENETICHE (ES. SPINA BIFIDA)
- ✓ AMPUTAZIONI (ES. EMIPELVECTOMIA, COSCIA, POA)

DOMINO
inserto
SEAT


BAMBINO ADULTO ANZIANO

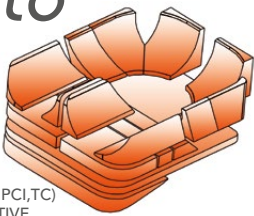

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. PCI,TC)
- ✓ MALATTIE DEGENERATIVE (ES. MALATTIE MOTONEURONE, PARKINSON)
- ✓ MALATTIE NEUROMUSCOLARI E GENETICHE (ES. DISTROFIE, LEUCODISTROFIA, SMA, SINDROME DI RETT)

NAUCO
inserto
SEAT

BAMBINO ADULTO

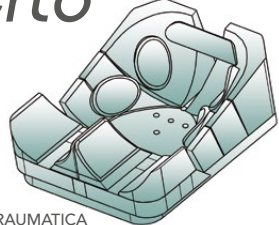

- ✓ LESIONI ORIGINE TRAUMATICA E NON (ES. TETRAPLEGIA)
- ✓ PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI E GENETICHE (ES. DISTROFIA, SPINA BIFIDA, LEUCODISTROFIA)

	MEDIANO	DOMINO	NAUCO	NOVO	TANTO	PUCCO	VIP
NO	NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO / ALTO
ALTA	ALTA	MODERATA/ALTA	MODERATA/ALTA	MODERATA/ALTA	MODERATA/ALTA	MODERATA/ALTA	MODERATA
MODERATA	MODERATA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
MENO IDONEO	MENO IDONEO	NON IDONEO	NON IDONEO	IDONEO	IDONEO	NON IDONEO	NON IDONEO

si clinica, delle necessita' dell'utente nella scelta del sistema di postura e della prescrizione
que a carico del prescrittore.

Richiedi maggiori informazioni sulle soluzioni e le pubblicazioni delle ricerche svolte all'indirizzo info@promedicare.it



PRODOTTO DA:



Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Fax. +(39) 0831 730739
Email: sales@promedicare.it
www.versainserito.com
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485



ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserito.com

Il produttore si riserva di apportare modifiche o sostituzione senza preavviso. I contenuti, la forma, la creazione, l'ingegno, l'immagine, la strutturazione di questo catalogo, sono di proprietà della Pro Medicare srl. Ogni utilizzo improprio e non autorizzato è vietato. Ogni imitazione e/o copia esplicita e non, potranno essere perseguite. Opere di copertina dell'artista Giuseppe Ciraci - www.giuseppeciraci.com - ogni riproduzione è vietata.